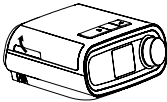
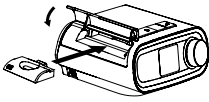





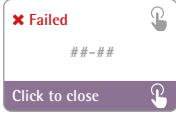


# Instructiekaart wifi-module koppelen aan een DreamStation

Uw DreamStation kan automatisch gegevens over de therapie naar uw zorgverlener versturen. Daarvoor is een wifi-module noodzakelijk. In dit stappenplan leest u hoe u de wifi-module in het apparaat plaatst en verbindt met uw wifi-netwerk.

## Westfalen Medical BV

Postbus 124  
7400 AC Deventer  
Nederland  
Tel. +31 (0) 570 – 234 625  
Fax +31 (0) 570 – 858 451  
www.cpapinfo.nl  
cpapinfo@westfalen.com

<p><b>1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld (afgekoppeld van de stroom).</b></p>  <p>Open de accessoiresdeur aan de linker zijkant.</p>	<p><b>2. Schuif de wifi-module in de accessoiresleuf, totdat u een klik hoort.</b></p>  <p>Sluit de deur en wacht 30 sec.</p>	<p><b>3. Zorg dat de DreamStation weer stroom krijgt.</b></p> 
<p><b>4. U kunt in het menu opties selecteren, wijzigen en bevestigen met de draaiknop. Draai om te scrollen en druk op de knop om te bevestigen. Navigeer in het menu naar My Setup (mijn instellingen).</b></p>  <p>Selecteer wifi.</p>	<p><b>5. Het apparaat zoekt nu naar beschikbare netwerken.</b></p>  <p>Selecteer uw netwerk. Staat uw netwerk er niet bij? Scroll dan naar beneden, naar "other (andere)" en voer handmatig uw netwerknaam in.</p>	<p><b>6. Voer het wachtwoord in van uw netwerk en selecteer het groene vinkje.</b></p>  <p>Let op hoofdletters, kleine letters en symbolen (speciale tekens).</p>
<p><b>7. Na het invoeren van het wachtwoord maakt het wifi-module verbinding met het netwerk.</b></p> 	<p><b>8. Zodra er verbinding is gemaakt met uw wifi-netwerk laat de DreamStation de signaalsterkte zien.</b></p>	<p><b>9. Kan er geen verbinding gemaakt worden met de router? Doorloop dan alle stappen opnieuw.</b></p> 

## Productondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het instellen, gebruik of het onderhoud van de wifi-module voor uw DreamStation? Wij beantwoorden al uw vragen en helpen u graag verder zodat u bent verzekerd van een apparaat dat optimaal functioneert. U kunt ons op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur bereiken via +31 (0) 570 – 234 625. Een instructievideo over het plaatsen van de wifi-module kunt u vinden op [www.cpapinfo.nl/downloads/videos/philips](http://www.cpapinfo.nl/downloads/videos/philips).