






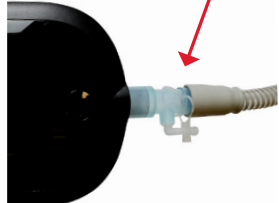




Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451
www.cpapinfo.nl
cpapinfo@westfalen.com

Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met een standaard slang

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van een standaard slang. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de Philips Dreamstation 2. Andere CPAP-apparaten zien er anders uit, maar in alle gevallen is een CPAP-slang met een flexibel uiteinde aangesloten op het masker. Het aansluiten van de zuurstof (O₂) connector zal daarom vergelijkbaar zijn.

Let op: Het is erg belangrijk dat er geen zuurstof in de CPAP kan stromen. Als dit gebeurt dan kan er een storing optreden. Om dit te voorkomen is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.
Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. O₂-connector met aansluitpunt.</p>  | <p>2. Philips DreamStation 2.</p>  | <p>3. Aansluiting CPAP-slang.</p>  |
| <p>4. Haal de CPAP-slang van de uitlaatpoort van het CPAP-apparaat.</p>  | <p>5. Plaats de O₂-connector op de uitlaatpoort van het CPAP-apparaat.</p>  | <p>6. Plaats de CPAP-slang op de O₂-connector.</p>  |
| <p>7. Verwijder het dopje van het aansluitpunt.</p>  | <p>8. Plaats de zuurstofslang op het aansluitpunt van de O₂-connector.</p>  |  <p>Westfalen medical</p> <p>Neem bij vragen of twijfel contact met ons op.</p>  0570 - 234 625 |